

保証書付き

家庭用

取扱説明書

# SALONIA

## MANUAL

### AQUA PEELING DEVICE

アクアピーリングデバイス

SAL22204SL

---

SALONIA



LINE



OFFICIAL SITE

X

Instagram

Facebook

LINE

## 安全上のご注意 - 必ずお守りください -

このたびはお買い上げいただき、  
まことにありがとうございます。

ご使用前に、取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

特に「安全上のご注意」をよくお読みになり、大切に保管してください。

ここに示した注意事項は、商品を正しく安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 <b>危険</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険性が切迫して生じることが想定される内容を示します。
 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負うことが想定されるか、または物的損害*の発生が想定される内容を示します。

\*物的損害とは、家屋、家財及び家畜、ペットにかかる拡大損害を示します。

### 絵表示の例

 <b>禁止</b>	してはいけない内容です。
 <b>必ずまもる</b>	しなければならない内容です。

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつでも見られるように必ず保管してください。

### **警告**

	次の症状に該当する方は使用しない。 (肌や身体のトラブルの原因になる可能性) <ul style="list-style-type: none"><li>●アレルギー体質の方</li><li>●皮膚病およびアトピー性皮膚炎の方</li><li>●敏感肌・お肌の弱い方</li><li>●顔面の神経障害のある方</li><li>●急性疾患がある方</li><li>●悪性しゅよう(腫瘍)のある方</li></ul>
--	---

(ホルモンバランスが不安定なため肌トラブルの原因になる可能性)

- 妊娠初期の不安定期から出産直後(授乳中)までの方
- 生理中の方
- 成長過程の方
- 幼児や成長期の子供、および自分で意思表示のできない方

次のような場合または部位には使用しない。

(事故や体調不良、失明、肌や身体のトラブル原因になる可能性)

- 急性疾患
- 有熱性疾患
- 血圧異常
- 血友病疾患
- 感染症疾患
- 結核性疾患
- 悪性腫瘍
- 顔面神経痛
- まぶた
- 眼球
- のど
- 唇
- 口内や陰部、粘膜など
- 傷口
- ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位
- 感覚、知覚障害を起こしている部位
- 整形手術をした部位
- 脱毛処理後24時間以内の部位
- 整形や骨折などで顔面に金属やシリコン、プラスチックなどの埋め込み手術を受けた部位
- 合成樹脂でかぶれたことのある方
- 皮膚が化膿し炎症を起こしている部位
- かゆみやほてりなど皮膚に異常のある部位
- 過度の日焼けにより肌がヒリヒリし炎症を起こしている部位
- 化粧品による皮膚炎を起こしている部位
- 物理的刺激などによる病的なシミ

次のような方は、使用可能か医師に相談のうえ、使用する。

(事故や肌トラブルが生じるおそれ)

- 病院やクリニックで医師の治療を受けている方
- 使用中に肌へ刺激や異常を感じた方

!

## 【電源に関する事項】



濡れた手で充電端子やケーブルを触らない。  
感電やけがの原因となります。

充電端子やケーブルを水につけたり、水洗いしたりしない。

ケーブルは浴室や湿気の多い場所で使用・保管したり、洗面台の上など水のかかりやすい場所に置いたりしない。

火災や感電の原因となります。

ケーブルは傷めない。

(傷つける・加工する・無理に曲げる・引っ張る・ねじる・重い物を載せる・挟み込む・つぶすなど)

感電・やけど・ショートによる火災などの原因となります。

万一、異常が発生したら、本体の電源をオフにする。また、充電をしているときはUSB端子をすぐに抜く。

けむり、異音、異臭がするなど、異常状態のまま使用しないでください。

ケーブルを抜くときは、必ず先端を持って引き抜く。また、濡れた手で抜き差しはしない。

感電、ショート、発火、故障の原因となります。

ケーブルは乳幼児や幼児、お子様の手の届く場所で使用したり、保管したりしない。

誤飲や誤操作による事故やけがの原因となります。

充電端子とUSB端子に水が付着していないことを確認してから充電する。

感電、ショート、発火、故障の原因となります。

使用しないときは必ず電源をオフにする。

感電、ショート、発火、故障の原因となります。

地震や雷を感じたら使用を中止し、電源を切る。充電中の場合はUSB端子を抜く。

## 【本体に関する事項】



過剰な連続使用はしない。

(業務用としての使用など)

けが、発熱などの原因となります。過度なご使用はお肌を傷める可能性があります。

加熱したり、火の中へ投入しない。

火のそばや直射日光の下、ほこりっぽい場所、高温下での使用・充電・放置しない。

また、熱器具に近づけない。

充電池を内蔵しているため、発熱・発火・破裂・動作不良の原因となります。



サウナや岩盤浴へは絶対に持ち込まない。  
本体が高温になり、けがややけどの原因となります。

乳幼児や幼児、お子様の手の届く場所で使用したり、保管しない。

誤飲や誤操作による事故やけがの原因となります。

自分で意志表示ができない人、皮膚感覚の低下した人に使わせない。また、子供や身体の不自由な人だけでの使用は避ける。未成年の方は保護者同意の上、保護者監視のもとを使用する。

感電やけが、やけどの原因となります。

取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。

けがや故障の原因となります。

修理・改造はしない。

廃棄する時以外は絶対に分解しない。

火災・感電・けがの原因となります。

本製品は一度分解すると防水機能が保持でき無くなります。



ただちに使用を中止し、お買い上げ販売店やお客様窓口に点検を依頼する。

本体、ケーブルが

- 変形したり異常に発熱している
- 焦げ臭いにおいがする
- 使用中に異音がする

火災・感電・けがの原因となります。

## ⚠ 注意

### 【USB端子に関する事項】

	内部や周辺にゴミを付着させない。 感電やショートによる火災の原因になります。
	USB端子を外す時は、ケーブルを引っ張らずに必ず端子をしっかり持ちゆっくり引き抜く。 感電やけがの原因になります。
	充電時以外は、充電電源からUSB端子を外した状態にする。 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。


### 【その他の事項】

	肌に対して、以下のような吸引をしない。 ・垂直に引っ張る ・吸引ヘッドを滑らせる ・同じ箇所に繰り返し使用する 紫斑(しほん)や傷の原因になります。
	使用頻度、使用時間を守る。 紫斑(しほん)や傷の原因になります。
	吸引パイプを触らない。 吸引パイプが外れる恐れがあります。
	本体に重い物を置いたり、本体や充電ケーブルは落としたり、ぶつけたりして衝撃を与えない。 故障やけがの原因になります。
	不安定な場所に置かない、充電しない。 故障の原因になります。落下により破損、発火の原因になります。
	電子レンジや高圧容器に入れない。 発熱、発火、破裂の原因になります。
	充電するときは乾いた布などで本体や充電端子の水気をしっかりと拭き、充電する。 感電・ショート・発火・故障の原因となります。
	タンクに水が入っているとき横に倒さない。 ショート・故障の原因となります。
	湿気の多いところで保管しない。 感電、ショート、故障の原因になります。
	浴槽に入れない。 故障の原因になります。
	シャワーを浴びながら使用しない。 故障の原因になります。


	取扱説明書に記載されている美容以外の用途で使用しない。 故障やけがの原因になります。
	本体を共有する場合、取扱説明書に記載のお手入れ方法に従ってお手入れの上、使用する。尚、安全上のご注意に記載のある項目に該当する方とは本体を共有しない。 感染症や肌トラブルの原因となります。
	本体をアルコール・シンナー・ベンジン・除光液などの溶剤でふかない。 本体の表面に損傷を与える原因になります。
	温泉や入浴剤入りのお湯で使用しない。 故障の原因になります。
	電源をオンにした状態で床や家具の上などに放置しない。また、使用後は電源をオフにする。 家具などの破損や、けがの原因になります。
	吸引ヘッド部分を鋭利なもので触れたり、引っ張ったりしない。 故障の原因となります。
	本体を熱湯やドライヤーの熱風にさらさない。 本体が変形したり溶けたりする原因となります。
	本体が濡れた状態で保管しない。使用後に本体が濡れている場合は、吸引ヘッドを取り外して、本体についた水分を取り除き、風通しの良い場所で十分に乾燥させる。 故障の原因となります。
	ペットには使用しない。 けがの原因になります。
	使用前に、必ず練習をする。
	使いはじめは必ずレベル1から使用する。
	使用後は、毎回お手入れを行う。 汚れや皮脂が残り、故障の原因となります。
	使用前に、本体に欠けや割れ、変形などの破損がないか必ず確認する。 肌を傷つける原因になります。
	本体は顔のみに使用する。(練習するための腕は除く) 肌を傷つけたり、炎症などの原因になります。
	使用中に気分が悪くなったり、お肌に異常があらわれたら、ただちに使用を中止する。 お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。翌日以降も異常が続く場合は、医師にご相談ください。

## 各部分の名称

### 本体

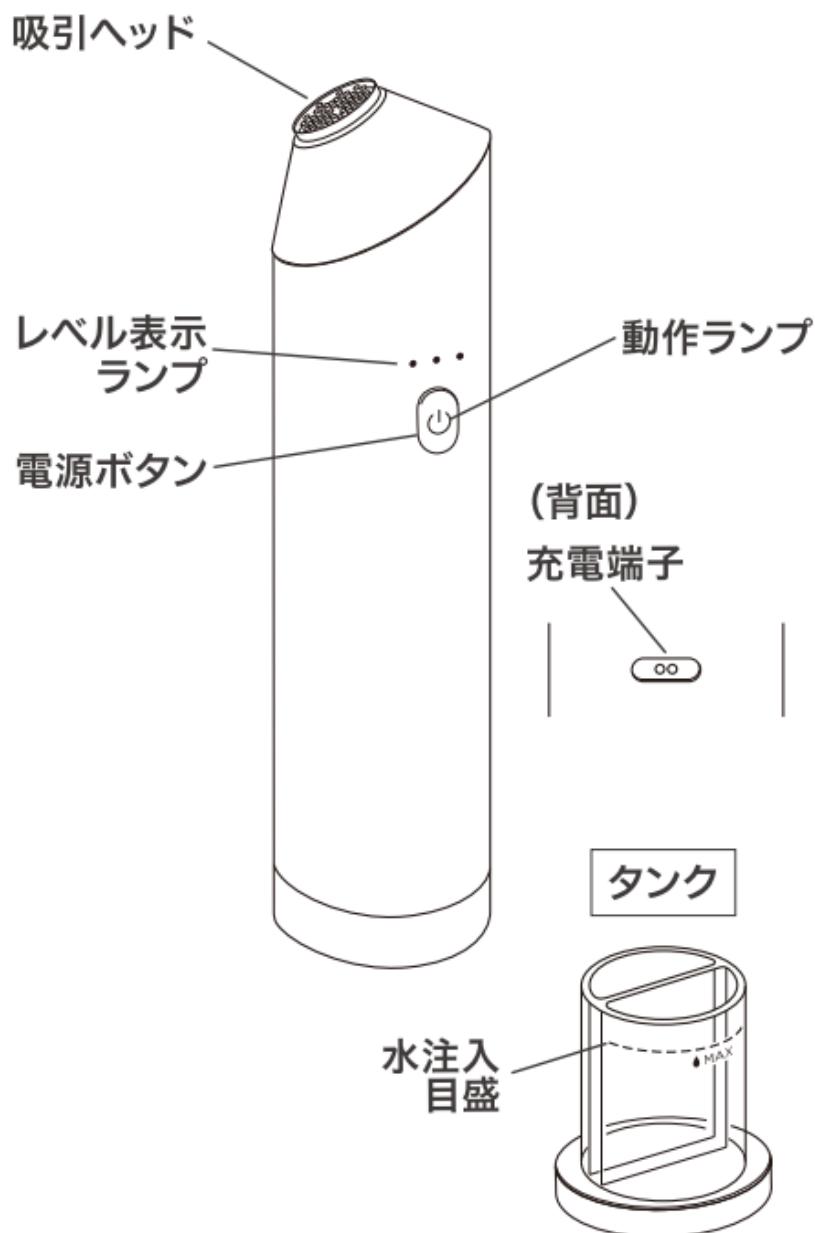

### 充電ケーブル

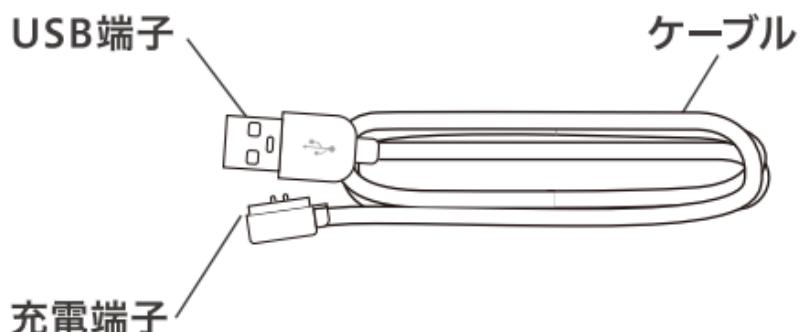

※製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

### 内容物

- 本体:1台
- 充電ケーブル:1本
- 取扱説明書(保証書付き):1冊
- ご使用前に:1枚

## ご使用前に

### 充電方法

取り付け前に本体の水滴を必ずふいてください。

- ①本体と充電ケーブルの充電端子が合わさるようにし、本体に充電端子を取り付けます。充電端子には左右どちらの向きで取り付けても充電ができます。
- ②充電ケーブルをUSB対応ACアダプターやパソコンなどに接続します。
- ③本体の動作ランプが赤色に点滅すると充電が開始されます。
- ④約2.5時間で充電が完了し、動作ランプが赤色に点灯します。

### 充電電源について



USB端子の形状はType-A(長方形の平らな形状)です。  
USB対応ACアダプターにて充電をしてください。

### 電源のオン・オフ

- ①本体側面の電源ボタンを2秒以上長押しすると電子音とともに動作ランプが白色に点灯し、電源がオンとなり動作を開始いたします。
  - ②動作ランプが白色に点灯している状態で、電源ボタンを2秒以上長押しすると電子音とともに動作ランプが消灯し電源がオフになります。
- ※電源オン時や使用中に動作ランプが赤色に点滅したら充電残量が少なくなっています。充電してください。

### 動作ランプの見方

 白点灯:電源オン

 消 灯:電源オフ

 赤点灯:充電完了

 赤点滅:充電残量不足または充電中

### 使用時間、使用頻度について

週1～2回を目安にご使用ください。

※電源をオンにした後、2分30秒経過すると自動でオフになります。連続使用はしないでください。

- 小鼻のまわりに…1分以内/回
- 額・ほお・あご…1分30秒以内/回

肌に吸着させてから1秒程度で離してください。

### 肌について

- 肌の様子を見ながら回数・時間を調整し、使用してください。
- 吸引時、1か所に静止させて使用しないでください。
- 紫斑(しほん)ができた場合は、使用を中止し1週間ほど様子を見てください。症状が続く場合、医師に相談してください。


## 吸引ヘッドの離しかた

<ご使用の前に、必ず練習をしてください>


初めて使うときは、必ず上腕部など、目立たないところで吸引ヘッドを肌から離す練習をしてください。




手首を返すように離す

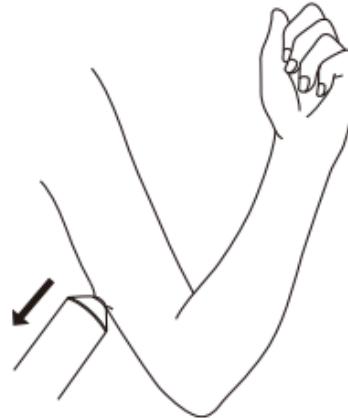

垂直に引っ張ると肌から離れにくい

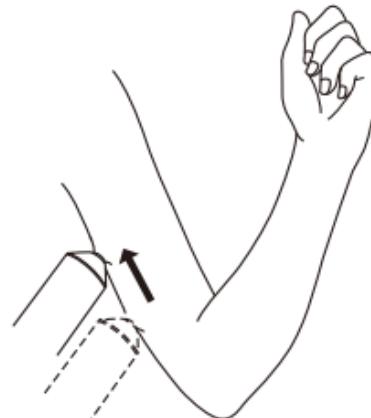

吸引ヘッドを滑らせない

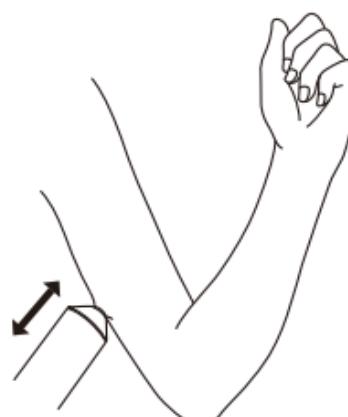

同じ箇所を繰り返し使用しない


## 使い方

- ・ご使用前は、必ず化粧を落としてください。
- ・必ず水(水道水)を入れてご使用ください。肌を傷める恐れがあります。
- ・使用時間は、P.8の「使用頻度について」に従ってお使いください。
- ・本製品は、タンクの水注入側に入れた水を使用し、洗浄後の水がタンクの反対側に溜まる仕様となっています。お肌への当て方によっては、水が足りなくなったり、洗浄後の水がタンクの反対側に溜まらない場合があります。
- ・本体使用中に出る水により、服がぬれる場合があります。気になるときはタオルなどで水をふきながらご使用ください。

### おすすめの使い方

ご使用前に蒸しタオルなどで顔を温めると、毛穴が柔らかくなり吸引しやすくなります。

- ①本体からタンクを外してください。

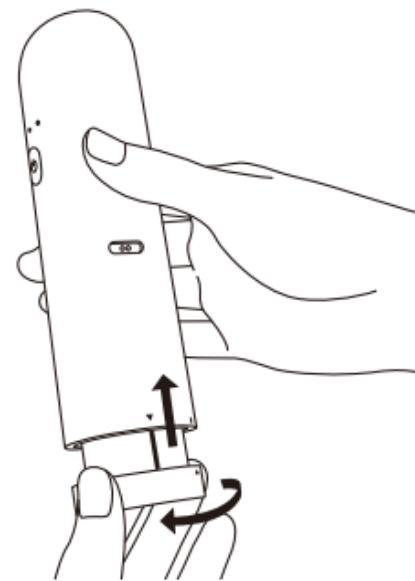

#### ※タンクの取り外し方




(商品背面)

本体とタンクをしっかりと  
もち、商品背面の目印を  
ずらすように回し、タン  
クを下側に引き抜いて  
外してください。


- ②タンクの水注入側に目盛線まで水道水を入れてください。

- ・毎回新しい水を使用してください。

MAX  
の印字がある  
側に水道水を  
入れてください

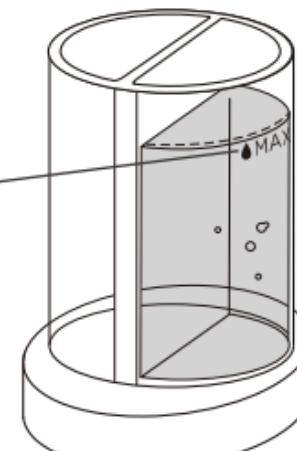


③吸引パイプをタンクの水注入側に入れて、タンクを水平にして取り付けてください。

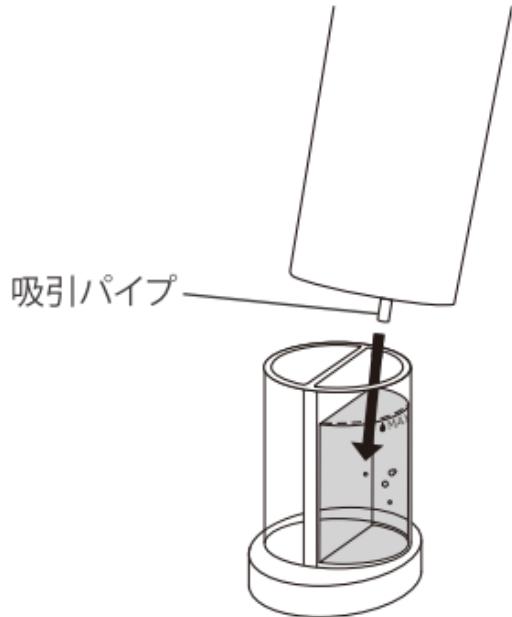


**※ 吸引パイプを触らないでください。**

吸引パイプが外れる恐れがあります。万が一外れた場合は、本取扱説明書のP.16の「よくあるご質問」の内容に従って再装着してください。

#### ※タンクの取り付け方

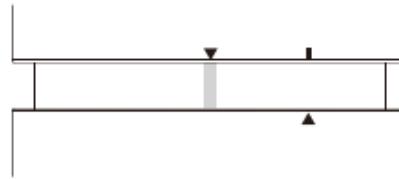

①タンクの縦線に、本体背面の目印(▼)を合わせるように差し込んでください。

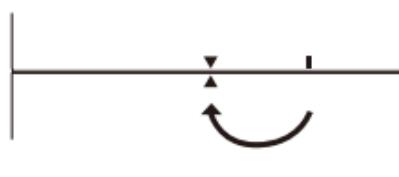

②本体背面の目印(▼)とタンクの目印(▲)を合わせるようにタンクを回して取り付けてください。

④電源ボタンを2秒以上長押ししてください。

⑤電源ボタンを短押しして、吸引レベルを選択してください。

使いはじめは必ず1からご使用ください。

○ ● ●

○ ○ ●

○ ○ ○



レベル1



レベル2




レベル3

吸引レベルはレベル1、レベル2、レベル3の3段階あります。電源ボタンを短押しすると、吸引レベルが切り替わります。

\*レベルを高くすると吸引が強くなります。

⑥1秒程度吸引ヘッドを吸着させ、すぐに手首を返し、吸引ヘッドを離してください。

※誤操作の恐れがあるため、電源ボタンに振れないようご注意ください。

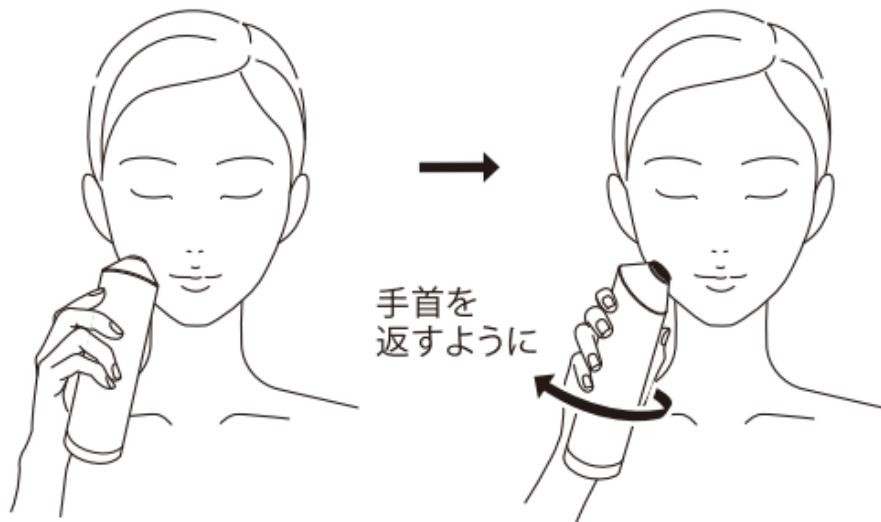


⑦ご使用が終わったら、本体の電源をOFFにして（長押し約2秒）、お肌の水分をふき取ってください。気になる方は肌を水で洗い流してください。ご使用後は次のページをご参照の上、本体のお手入れを行ってください。

### タンクに水が入っている状態で 大きく傾けないでください！

タンク内の水が、吸引ヘッドと本体の間から漏れる恐れがあります。

本体が大きく傾くとエラー音が鳴り、傾いた状態で10秒経過すると動作が停止します。本体を水平に戻すとエラーが解除されますので、使用中や手を離す際は必ずまっすぐ立てた状態にしてください。

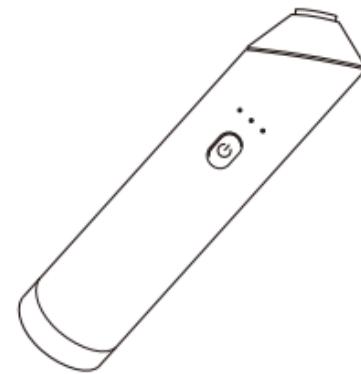

使用方法を動画で確認することもできます。  
下記QRコードを読み込んでください。




## お手入れ方法


ご使用後は毎回お手入れを行ってください。汚れや皮脂が残り、故障の原因となります。

### 本体内部のお手入れ

- ①吸引ヘッド内に皮脂汚れなどがある場合は、タオルで拭いたり、水で洗い流すなどきれいにしてください。

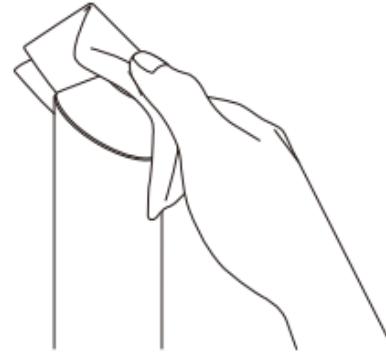


- ②水道水をタンクに入れ、本体にタンクをセットしてください。

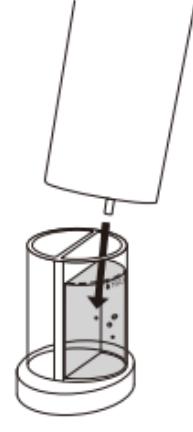

- ③電源ボタンを2秒以上長押しし、電源を入れてください。



- ④吸引力はレベル1を設定し、吸引ヘッドを清潔な指や手の腹で押さえてください。約1分間吸着させ、水道水を循環させてください。

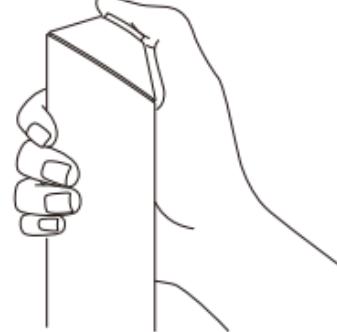

※汚れが気になる場合は、ぬるま湯をご使用ください。

## 吸引ヘッド・タンクのお手入れ

- ①吸引ヘッド・タンクを本体から取り外し、水で洗い流してください。  
(吸引ヘッドの取り外し方は「吸引ヘッドの取り付け方・取り外し方」をご参照ください。)



- ②本体と吸引ヘッドをタオルなどの乾いた布できれいに拭き、乾かします。タンクは本体に装着する前に、しっかりと乾かします。




- ③吸引ヘッド、本体、タンク共に完全に乾いてから、吸引ヘッド・タンクを本体に再度セットしてください。

(吸引ヘッドの取り付け方はP.15の「吸引ヘッドの取り付け方・取り外し方」をご参照ください)


## 吸引ヘッドの取り付け方・取り外し方

### 吸引ヘッドの取り付け方

- ・吸引ヘッドを持ちます。
- ・吸引ヘッド凹形状部と本体側凸形状部の取り付け指標を合わせ、時計回り方向で回して取り付けてください。回らなくなるまでしっかりと回して取り付けてください。

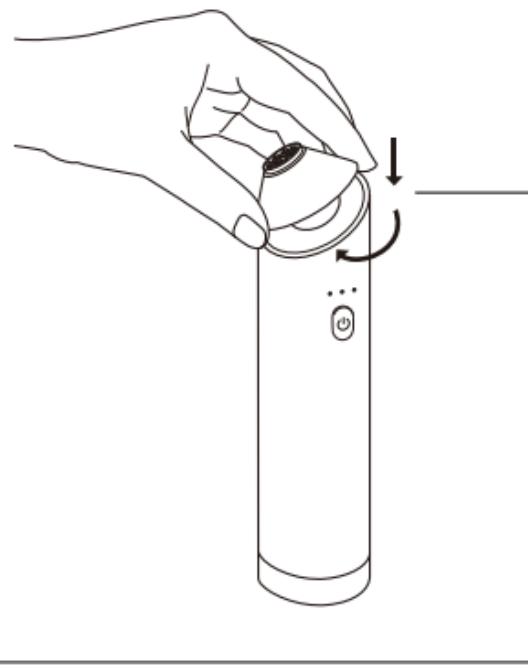


吸引ヘッドと本体の取り付け指標

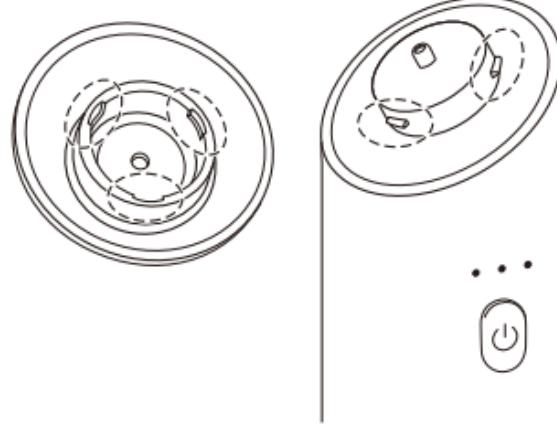

### 吸引ヘッドの取り外し方

- ・吸引ヘッドを持ちます。
- ・吸引ヘッドを反時計回り方向で回して取り外してください。

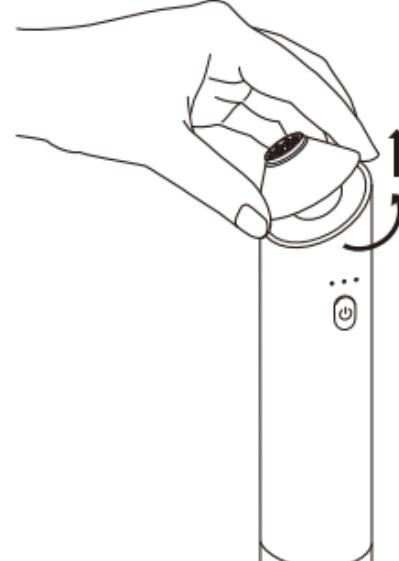

## 故障かな?と思ったら

こんなときは	► 考えられる原因	► 処理の方法
水が出ない	吸引パイプが正しく入っていない	吸引パイプをタンクの水注入側に入れてください
吸引ヘッドと本体の間から水が漏れる	本体を大きく傾けている	本体をまっすぐ立てた状態で使用してください
電源がオンにならない	電源ボタンが長押しされていない	電源ボタンを長押しして(押し続け)ください
	充電残量がない	充電ケーブルを接続し、必ず本体の動作ランプが点滅・点灯しているか確認の上、充電してください
充電が開始されない(動作ランプが赤色に点滅しない)	本体と充電ケーブルの充電端子がしっかりと取り付けられていない	本体と充電ケーブルの充電端子が隙間なく取り付けられているか確認してください
	充電端子が汚れている	乾いた布で充電端子をお手入れしてください

## よくあるご質問

**Q. 週に何回使ってもいいですか?**

**A.**週に1~2回のご使用をおすすめします。週に3回以上使用する場合は、肌の様子を見ながらご使用ください。

**Q. 強く押しあてたほうが効果がありますか?**


**A.**強く押しあてる必要はありません。肌に負担がかからないように軽くあててください。

**Q. 肌がピリピリするけど、大丈夫ですか?**

**A.**お肌に異常があらわれた場合は使用を中止してください。そのまま使用を続けると症状を悪化させがあるので、皮膚科専門医などにご相談されることをおすすめします。

**Q. 吸引パイプが外れてしまいました。**

**A.**手やピンセットを使って再装着してください。正面側(SALONIAロゴのある側)の吸引パイプ受け口に差し込むように装着してください。手を放して取れない状態であれば再装着完了です。

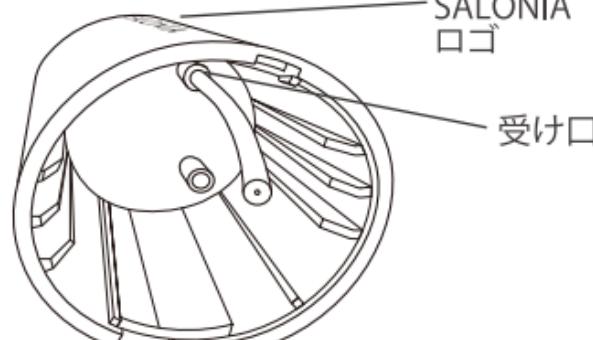

## 仕様

電源方式	充電式
定格電圧	DC5.0V
定格容量	600mAh
充電時間	約2.5時間 <small>※5Vで充電した場合 ※充電環境によって、充電時間は前後します。</small>
充電池	リチウムポリマー電池
質量	本体 約182g
消費電力	2.5W

## 保証とアフターサービス

### 商品保証について

- 取扱説明書、箱の注意書き等に従ったうえ、正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償にて修理あるいは交換いたします。修理・交換にて返却された本体や付属品などの所有権は全て当社に帰属するものといたします。
- 保証対応による修理・交換を除き、本品の使用または故障によって生じた損害については直接的・間接的問わず、当社は一切の責任を負いかねます。

### 修理・交換について

- 保証期間内の修理・交換の場合はお買い上げ販売店までご連絡ください。故障状況によってはお客様に送料・修理・交換費用をご負担いただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- あらかじめ故障のご連絡をいただけず、お買い上げ販売店やお客様窓口からの指示もないまま本品を送付されましても対応できかねます。
- 修理・交換は、本品が、本体や付属品などが全てそろつたお買い上げ当時と同一の状態であることが条件となります。

### 交換・返品について

- 本品が不良でない限り交換・返品を承ることはできかねます。また、使用方法が分からぬなどの理由による交換・返品もお受けいたしかねます。また、衛生上の理由から一度でも使用した本品のお客様都合による交換・返品はお受けいたしかねます。

### アフターサービス

## 廃棄について

- 本品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。
- 本体にはリチウムポリマー電池を使用しています。



## 充電池について

- 充電池は消耗品です。初期不良を除いて保証対象外になります。
- フル充電しても使用できる時間が極端に短くなった場合は、充電池の寿命が考えられます(充電回数の目安はおよそ300回)。その場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。

## 免責事項

次の場合、保証期間内であっても保証対象外となります。

- 本保証書、レシート、領収書、納品書などのご提示がない場合。
- お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 輸送・落下・衝撃などお取り扱いが不適切なために生じた故障または損傷。
- 環境や設備の不備、使用方法や注意事項に反するお取り扱いによって生じた故障または損傷。
- お客様の責に帰すべき事由により生じた機能に影響のない外見上の損傷。
- お客様の故意または重過失により生じた故障または損傷。
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などにより生じた故障または損傷。
- 本品を正規販売店以外の第三者からの譲渡により入手した場合。
- 本品を分解・改造した場合。
- 使用による本体内蔵充電池の消耗。

## 無料保証規定／保証期間はお買い上げ日より1年間になります。

- 取扱説明書及びその他注意書き等に従ったうえ、正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、本書記載内容に基づき、同一商品との無料交換をさせていただきます。
- 保証期間内の無料交換を依頼される場合は、お買い上げ販売店に本品、本保証書、レシート、領収書、納品書などと共にお持ちになり、ご提示ください。
- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前にお客様窓口にご相談ください。
- ご贈答品の場合、購入者様に購入店舗と購入時期をご確認のうえ、お客様窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次のような場合には無料交換の対象外となります。
  - (1) 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
  - (2) 本品に接続する他の機器に起因して生じた故障または損傷。
  - (3) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
  - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧などによる故障または損傷。
  - (5) 車両、船舶などに搭載して使用された場合に生じた故障または損傷。
  - (6) 一般家庭用以外(業務用など)で使用された場合に生じた故障または損傷。
  - (7) 本保証書、レシート、領収書、納品書などのご提示がない場合。
  - (8) 本保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan.)
- 免責事項も併せてご確認ください。
- 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。

## 保証書

商品名	サロニア アクアピーリングデバイス		
型 番	SAL22204SL		
★お買い上げ日	見 本 日		
保証期間	お		
お客様	お名前	様	
	ご住所	〒	
★販売店	お電話 ( )	—	
	電 話 ( )	—	

■販売店様へ ★印欄は必ず記入してお渡しください。

〈ご注意〉保証の対象は、正規販売店にてご購入いただいた商品に限ります。転売品や個人間の売買にて購入された商品は、保証の対象外となります。また、正規販売店による購入証明(保証書・レシート)がない場合も、保証の対象外とさせていただきます。※交換品の発送は日本国内に限ります。

- 本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。従って本保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様窓口にお問い合わせください。
- 保証書をご記入いただいたお客様の個人情報(保証書控え)は、無料交換対応及びその後の安全点検活動等のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

### 修理メモ

無断での転載・複製を禁じます。

### お問い合わせ

お客様窓口 0120-333-476

株式会社 I-ne

〒530-0005 大阪市北区中之島6-1-21

### 【お客様窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い】

株式会社I-neは、お客様の個人情報及びご相談内容を、確認、交換、ご相談への対応及びその後の安全点検活動等のために利用し、その記録を残すことがあります。株式会社I-neは、個人情報を適切に管理し、業務委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、お客様窓口にご連絡ください。